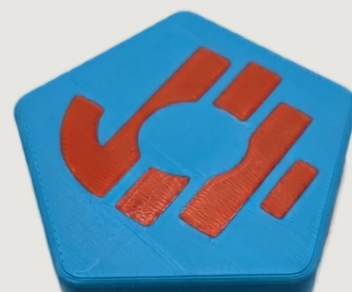
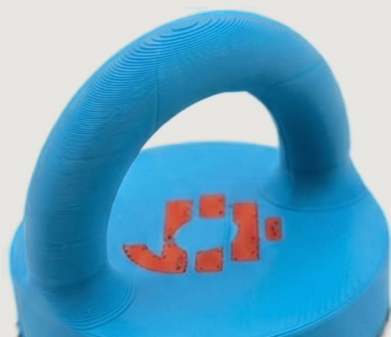


FingerStrap 3D

Codice documento IUFS3D01-IT**Revisione** Rev. 0 del 01.07.2025**Modello** FS3D-01**FOCUS 3D**

Via Berlinguer 3 · 42019 Scandiano (RE) · Italia

Tel. (+39) 333 6973608

focus3dhand@gmail.com

INDICE

01 Premessa**03** Riferimenti legislativi**05** Segnalazione/reclamo**07** Categoria dei consumatori ai quali è indirizzato**09** Contenuto della confezione**11** Stato di fornitura**13** Avvertenze e rischi residui**15** Luogo di utilizzo**17** Origine della merce**19** Usi vietati**21** Ricovero per un momentaneo inutilizzo**23** Dichiarazione del fabbricante**02** Responsabilità e garanzia**04** Campo di applicazione**06** Descrizione e/o informazioni generali del prodotto**08** Codice articolo/e e sua identificazione**10** Conservazione (prima dell'uso)**12** Montaggio degli strumenti**14** Caratteristiche tecniche**16** Accessori/optional**18** Destinazione d'uso/usi consentiti/come utilizzare**20** Manutenzione/pulizia**22** Smaltimento

01 Premessa

Desideriamo innanzi tutto ringraziarvi per avere scelto un prodotto FOCUS 3D.

Le presenti istruzioni sono state realizzate al fine di fornire una conoscenza generale di FingerStrap 3D, e dare le istruzioni d'uso, manutenzione e tutte le notizie ritenute necessarie per il suo BUON FUNZIONAMENTO.

La FOCUS 3D ha la facoltà di apportare variazioni e/o migliorie sulla produzione dei propri articoli e sui contenuti delle presenti istruzioni senza che ciò comporti l'obbligo di aggiornare i prodotti e le istruzioni precedenti.

 I particolari che costituiscono FingerStrap 3D illustrati nelle presenti istruzioni non possono essere intercambiati con altri particolari provenienti da articoli già in possesso del consumatore/rivenditore. Non è garantita intercambiabilità tra forniture diverse.

 Se la vendita non è stata fatta direttamente dalla FOCUS 3D, chi si ravvede come rivenditore/grossista deve consegnare le presenti istruzioni al consumatore finale, nel momento in cui viene conclusa la vendita.

Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del presente documento.

Conservare le presenti istruzioni insieme alla sua etichetta, per consultazioni future, in un luogo protetto.

Assieme alle presenti istruzioni l'utilizzatore deve conservare il documento comprovante l'acquisto. Rispettare completamente le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni, per ottenere il massimo beneficio in completa sicurezza.

Buon allenamento e grazie per avere scelto FingerStrap 3D.

02 Responsabilità e garanzia

Garanzia per eventuali difetti di fabbricazione: **24 mesi**.

Per la sostituzione in garanzia, il prodotto deve essere restituito franco fabbrica, nella sua confezione originale.

La garanzia non copre:

- I prodotti che siano stati modificati senza l'esplicita autorizzazione di FOCUS 3D;
- I prodotti che si sono rotti/danneggiati durante il trasporto;
- I prodotti che sono stati utilizzati impropriamente o per scopi diversi da quelli stabiliti;
- I prodotti nei quali siano state sostituite delle parti con ricambi non originali;
- I prodotti che subiscono un normale degrado/usura dovuto all'uso/tempo.

03 Riferimenti legislativi

Il prodotto rispetta gli obblighi dettati dal Reg. UE n. 2023/988 del 10 maggio 2023 e i materiali utilizzati per la fabbricazione soddisfano i requisiti del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH).

Come identificativo dell'articolo, si ritiene di utilizzare il riferimento al Modello, riportato al Par. 14 — Caratteristiche tecniche.

Ad ogni singolo FingerStrap 3D è attribuito un "numero di serie" / "lotto di fabbricazione" univoco.

04 Campo di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano all'elenco dei prodotti citati al paragrafo 8 — Codice articolo/e e sua identificazione.

05 Segnalazione/reclamo

Qualsiasi segnalazione che il consumatore vorrà avanzare (es. reclamo, segnalazione di incidente o problema di sicurezza che abbia coinvolto il prodotto), dovrà essere indirizzata a chi gli ha venduto il prodotto (Fabbricante/Rivenditore/Grossista) citando il modello ed il numero di serie/lotto indicato sull'etichettatura presente sulla confezione.

Se il reclamo proviene direttamente dal distributore (o rivenditore) dovrà essere indirizzato a FOCUS 3D; se il distributore (o rivenditore) riceve il reclamo dal consumatore, lo stesso deve essere immediatamente segnalato a FOCUS 3D.

06 Descrizione e/o informazioni generali del prodotto

FingerStrap 3D è un set di forme intercambiabili pensato per simulare gesti e prese della vita quotidiana, offrendo una resistenza a strap regolata dal velcro. È realizzato con materiali resistenti e facilmente pulibili (vedere Par. 20 — Manutenzione/pulizia).

07 Categoria dei consumatori ai quali è indirizzato

FingerStrap 3D è adatto a dei Consumatori di età pari o superiore a 14 anni. Le persone con disabilità devono essere supervisionate durante l'uso.

08 Codice articolo/e e sua identificazione

Cod. FS3D-01

Il prodotto viene identificato tramite un'etichetta applicata sull'imballo primario, riportante il riferimento al modello e al numero di serie/lotto di fabbricazione.

09 Contenuto della confezione

Al ricevimento di FingerStrap 3D controllare che l'imballaggio sia integro e il prodotto non sia danneggiato, verificando che al suo interno siano presenti tutti i componenti, come sotto raffigurato. Se il prodotto risulta danneggiato, incompleto o presenta qualsiasi tipo di anomalia, non utilizzarlo. Rivolgersi al venditore per la sostituzione.

All'interno della confezione sono inclusi:

- 1 tavola base FingerStrap 3D, con superficie superiore rivestita in velcro a uncino e 2 ventose in silicone sulla parte inferiore per il fissaggio al tavolo;
- 2 oggetti a forma di pentagono, di dimensioni differenti, per una presa termino-terminale;
- 1 oggetto a presa piatta, per una presa termino-laterale;
- 1 oggetto a forma cilindrica con impugnatura, per esercitare la rotazione nella presa a chiave;
- 1 oggetto ad anello (gancio), per la simulazione della presa "a uncino";
- 1 oggetto con manico, per una presa a piena mano o l'impugnatura di tipo cilindrico.

Le superfici di contatto di ciascun oggetto, nella zona destinata all'adesione alla tavola base, sono rivestite in velcro ad asola. Questo consente una resistenza progressiva e controllata durante le fasi di aggancio e distacco, rendendo l'esercizio efficace e funzionale. Gli strumenti sono forniti custoditi in una scatola dedicata per mantenerli in ordine e proteggerli da danneggiamenti.

10 Conservazione (prima dell'uso)

Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette, dai raggi solari e lontano dalla portata dei bambini.

11 Stato di fornitura

Il prodotto viene fornito pronto all'uso, con il velcro già applicato sulle superfici di contatto.

12 Montaggio degli strumenti

Non sono necessari utensili.

Il velcro è preinstallato sia sulla tavola base (lato a uncino) sia sulle superfici di contatto degli oggetti (lato ad asola).

È sufficiente posizionare la forma desiderata sulla tavola base per iniziare l'esercizio.

13 Avvertenze e rischi residui

Tenere le confezioni dell'imballo e tutti i componenti di FingerStrap 3D fuori dalla portata di bambini e animali. In particolare, i sacchetti in cellophane possono rappresentare un rischio di soffocamento.

In caso di caduta di FingerStrap 3D, valutare l'integrità dei prodotti prima del riutilizzo. Per qualsiasi dubbio non utilizzare e rivolgersi al Venditore.

L'utilizzatore deve avere cura di operare in condizioni ed in scenari di sicurezza evitando ogni situazione di potenziale pericolo per sé e per gli altri. Rispettare scrupolosamente la destinazione d'uso quivi stabilita, ogni altro uso è VIETATO e quindi considerato improprio.

Persone vulnerabili e/o molto vulnerabili potranno utilizzare FingerStrap 3D solo se assistiti da un adulto responsabile.

 In caso di dubbi, cioè se ritenete appropriato o meno utilizzare FingerStrap 3D, si raccomanda di consultare un medico o terapeuta prima dell'utilizzo.

 Utilizzare il prodotto solo in condizioni di sicurezza e con movimenti controllati. Evitare gesti improvvisi, strappi o trazioni eccessive durante l'uso, in quanto potrebbero causare perdita di aderenza improvvisa o ridurre la stabilità della tavola.

 Utilizzare il dispositivo solo su superfici piane, stabili e non scivolose. Assicurarsi sempre che la superficie d'appoggio sia stabile e che le ventose siano correttamente fissate. L'uso su tavoli inclinati o instabili può causare la perdita di aderenza delle ventose e provocare la caduta del dispositivo o incidenti.

14 Caratteristiche tecniche

Marchio	FOCUS 3D
Modello	FS3D-01
Prodotto	FingerStrap 3D
s.n./Lotto	Vedi etichettatura
Materiale tavola base	PETG per stampa 3D
Materiale forme	PLA per stampa 3D
Materiale velcro	Nylon
Dimensioni tavola base	17×7×1,5 cm
Dimensioni forma cilindro	Lunghezza 10 cm · Diametro 5 cm
Dimensioni forma pentagono	4,5×4,3×2 cm e 6,8×6,6×2 cm
Dimensioni forma anello	Lunghezza 5 cm · Diametro 4 cm
Dimensioni forma piatta	5×5×6 cm
Dimensioni forma manico	Lunghezza 6,5 cm · Diametro 9 cm
Colore	Base nera fissa · Forme a scelta del cliente <i>(i colori possono essere suscettibili di variazioni senza preavviso non essendo gli stessi sinonimo di qualità, ma semplicemente scelte estetiche)</i>
Peso prodotto	310 g
Temperatura massima di utilizzo	+35 °C
Temperatura minima di utilizzo	+10 °C
Umidità (senza condensazione)	Max 80%

15 Luogo di utilizzo

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e il contatto con fonti di calore come stufe, forni o termosifoni, per prevenire un invecchiamento precoce dei materiali o in talune condizioni anche un loro danneggiamento che li potrà rendere inutilizzabili.

16 Accessori/optional

Non sono presenti accessori/optional.

17 Origine della merce

Prodotto di origine Italiana.

18 Destinazione d'uso/usi consentiti/come utilizzare

Il prodotto non è un dispositivo medico e nemmeno un giocattolo ed è destinato esclusivamente a scopi ludici-educativi di allenamento e benessere personale e non per scopi professionali.

FingerStrap 3D permette di simulare gesti e forme della vita quotidiana attraverso una resistenza a strap: ogni forma si applica alla tavola base tramite il velcro e l'esercizio si esegue lavorando contro questa resistenza, staccando la forma con uno strappo controllato.

Ideale per:

- Atleti che desiderano potenziare la presa;
- Musicisti che necessitano di maggiore agilità e coordinazione nelle mani;
- Chiunque voglia migliorare la forza e la destrezza della mano per hobby, sport o benessere personale.

Per l'uso posizionare la tavola base su una superficie piana e stabile e applicare la forma desiderata sfruttando l'aggancio in velcro.

Per garantire nel tempo la sua fruibilità è necessario eseguire una pulizia regolare, in particolare prima di riporlo in attesa di un successivo riutilizzo (vedere Par. 14 — Caratteristiche tecniche).

19 Usi vietati

È vietato:

- Sovraccaricare il prodotto forzando il meccanismo oltre il proprio limite per evitare danni.
- Usarlo in presenza di fratture / lussazioni recenti e instabili alla mano, al polso o all'avambraccio.
- Usarlo in presenza di dolore, infiammazione o altre sintomatologie mediche, alla mano, al polso o all'avambraccio senza un parere medico o di un terapista.
- Usarlo in fase iniziale post-chirurgica alla mano, al polso o all'avambraccio.
- Usarlo a contatto diretto con ferite/tagli, infezioni cutanee, dermatiti o danneggiamenti dell'epidermide.
- Usarlo con la sindrome del tunnel carpale non trattata o sintomatica.
- Usarlo in qualsiasi condizione in cui l'uso può provocare disagio, dolore o peggioramento dei sintomi.
- L'uso da parte di persone affette da patologie neurologiche e/o reumatiche senza un parere medico o di un terapista.
- Usarlo in presenza di dolori, formicolii, perdite di forza o sensibilità improvvise.
- Rilasciare improvvisamente lo strumento.
- Esporlo ai raggi diretti del sole, **fonti di calore, fiamme libere o umidità eccessiva**, poiché potrebbe deformarsi o deteriorarsi.
- Modificare le parti di cui è costituito il prodotto o sostituire parti di esse, direttamente da parte dell'utilizzatore.
- Usarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Mantenerlo in condizioni igieniche inadeguate.
- Indossare guanti durante l'uso.
- Indossare anelli durante l'uso.
- Usarlo come dispositivo medico.
- Usarlo come giocattolo e lasciarlo alla portata dei bambini.
- Lasciare il prodotto alla portata di animali per evitare il rischio di danneggiamenti o incidenti sugli stessi.

20 Manutenzione/pulizia

Pulire con un panno umido dopo l'utilizzo. Per una pulizia più accurata, usare acqua tiepida con un detergente neutro e risciacquare sotto acqua corrente.

Non lavare in lavastoviglie, non usare acqua sopra i 40°C, non asciugare con fonti di calore dirette.

Se il velcro perde tenuta, può essere rimosso e sostituito con un velcro adesivo simile.

Se siete nella necessità di sostituire delle parti del prodotto vi dovete rivolgere a chi ve l'ha venduto; non improvvisare riparazioni di fortuna o posticce.

21 Ricovero per un momentaneo inutilizzo

Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che sia stato pulito (vedi Par. 20 — Manutenzione/pulizia).

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e da fonti di calore dirette, per mantenerne l'integrità nel tempo.

22 Smaltimento

FingerStrap 3D deve essere smaltito secondo le regole vigenti nel luogo di utilizzo considerando le composizioni dei materiali indicati al par. 14 — Caratteristiche tecniche.

23 Dichiarazione del fabbricante

FOCUS 3D dichiara che il prodotto:

- denominato: FingerStrap 3D,
- modello: FS3D-01,
- s.n./lotto: tutti,

è conforme:

- al Regolamento UE n. 2023/988, ritenendolo "sicuro", essendo solo presenti rischi minimi compatibili con l'uso, considerati accettabili e coerenti con l'elevato livello di protezione della salute e sicurezza dei consumatori;
- al Regolamento UE n. 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH); in base a tale Regolamento FOCUS 3D è un produttore di "articoli" e non fabbrica sostanze o preparati (i nostri articoli non comportano il rilascio intenzionale di sostanze).

 Il numero di serie/lotto di FingerStrap 3D è riportato sull'etichetta applicata sulla confezione.

Conserva la confezione, o comunque l'etichetta con questo numero: potrebbe servirti per eventuali richieste a FOCUS 3D durante la validità del periodo di garanzia.

Si consiglia anche di tenere allegate le presenti istruzioni alla documentazione comprovante l'acquisto.

FOCUS 3D di Camilla Campani · Via Berlinguer 3, 42019 Scandiano (RE), Italia

focus3dhand@gmail.com · Tel./WhatsApp +39 333 6973608

Cod. IUFS3D01-IT Rev. 0 del 01.07.2025